

BEAUTIFIL II LS

ЗАПОЛНЯЕМЫЙ КОМПОЗИТ
Низкая усадка - высокая полируемость



PRG
Technology
Giomer



Новое и уникальное

Превосходная долговечность и эстетика в сочетании с низкой полимеризационной усадкой и низкими нагрузками:

Beautiful II LS (Low Shrinkage), новая пастообразная композитная система, разработанная на основе проверенного Beautiful II, обеспечивает стоматологам минимальную усадку и максимальную эстетику.

Самая замечательная особенность этого светоотверждаемого универсального композитного материала для реставраций передних и боковых зубов - это его уникальная усадка, составляющая 0,85 процента от объема!

Beautiful II LS отличается превосходной полируемостью и оптимально сочетается с естественными оттенками зубов.


Кроме того, интегрированная технология наполнения S-PRG помогает эффективно защитить эмаль и дентин от кислотных атак и бактерий кариеса - для выдающейся реставрационной терапии, характеризующейся высокой эстетикой, долговременной стабильностью и устойчивой профилактикой кариеса!



Отличные результаты при минимальных затратах времени и усилий

Благодаря штабелируемой и нелипкой консистенции этот устойчивый к цвету материал можно легко и быстро придать форму и адаптировать к структуре зуба.


Beautiful II LS позволяет стоматологам добиваться превосходных реставраций с долговечной красотой и функциональностью. Поставляется в удобных шприцах с удобными колпачками «в одно касание» или в наконечниках.

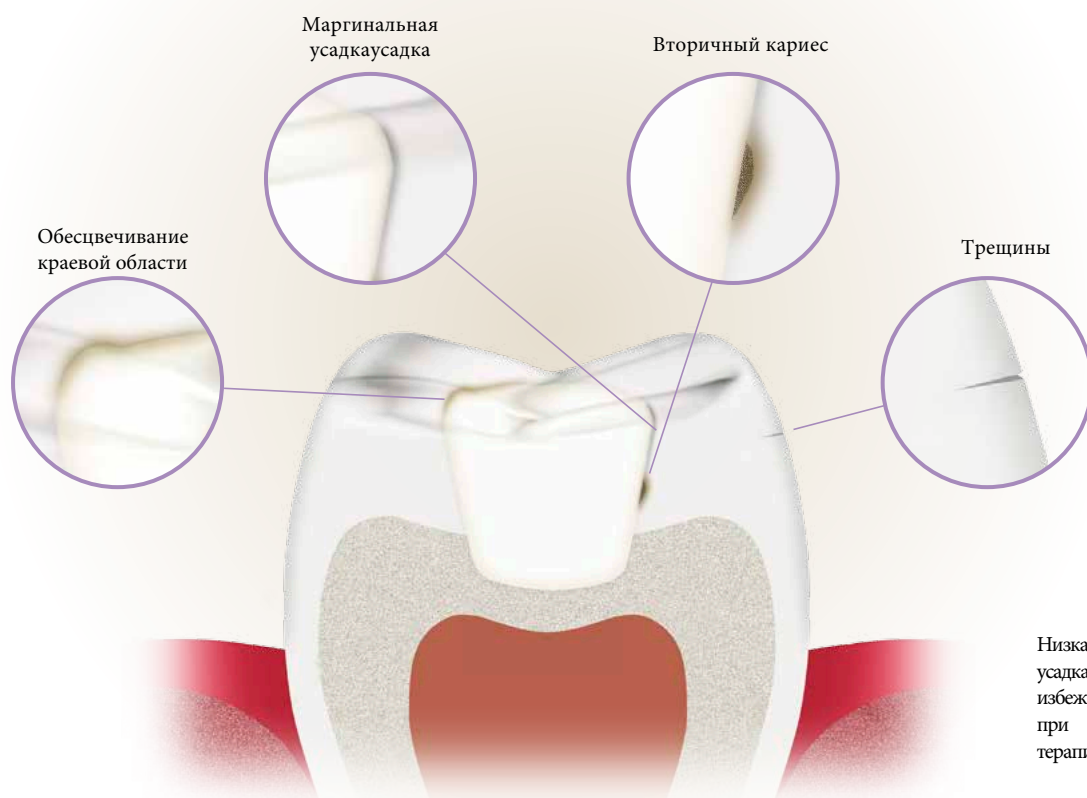

Низкая усадка и усадочное напряжение


Полимеризационная усадка является ключевым параметром успеха или неудачи прямых композитных реставраций. Современные композиты с низкой усадкой, такие как Beautiful II LS, помогают предотвратить микроподтекание и незначительное изменение цвета. В сочетании с надежными системами бондинга они позволяют стоматологам создавать по-настоящему прочные и эстетичные реставрации.

Полимеризационная усадка * протестирован согласно ISO 17304: 2013 (E)

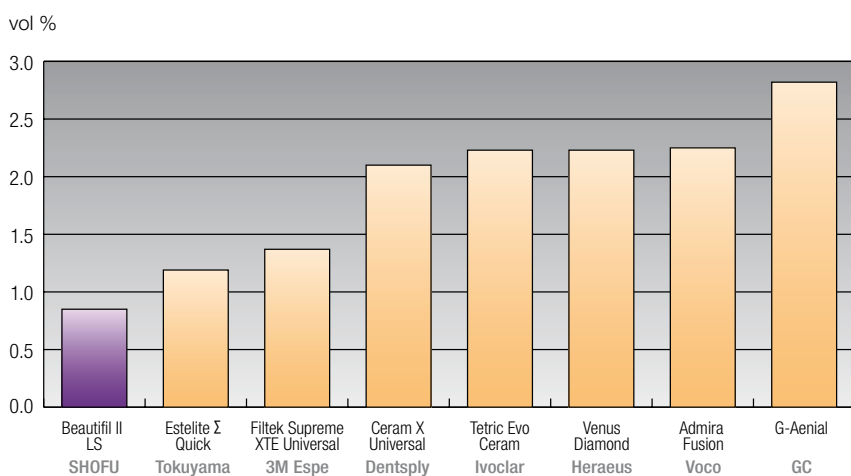

На этой диаграмме показана полимеризационная усадка Beautiful II LS по сравнению с продуктами конкурентов: Beautiful II LS достигает значения всего 0,85% по объему, что является самой низкой объемной усадкой среди всех протестированных материалов.

Усадочное напряжение *

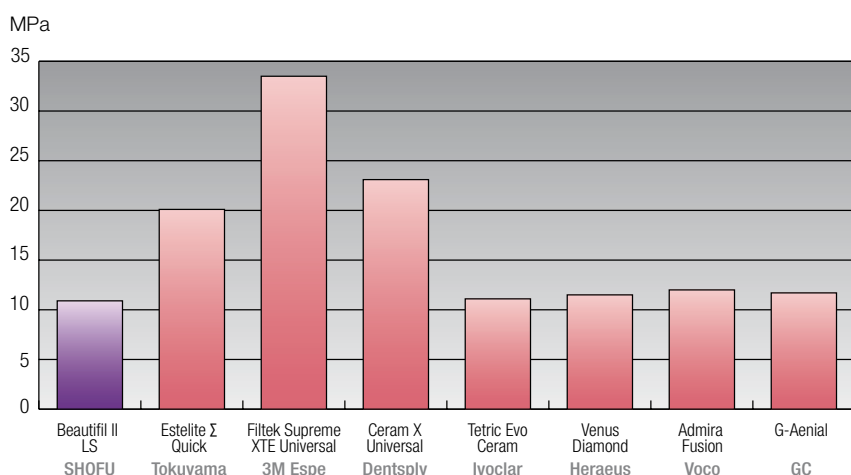


Напряжение усадки Beautiful II LS также впечатляет: он показывает одно из самых низких значений (10,9 МПа) среди всех испытанных композитов.



Естественное отражение света и сохранение блеска

Этот рентгеноконтрастный универсальный композит значительно улучшает эстетику: использование многофункциональных стеклянных наполнителей и преполимеризованных композитных наполнителей обеспечивает высокую стойкость к истиранию, благоприятную для антагонистов твердость поверхности и оптимальную прочность на сжатие. Кроме того, он приводит к естественному отражению света, что способствует воспроизведению естественной структуры зуба и создает сбалансированный эффект хамелеона как в дентине, так и в эмали. Благодаря этой специальной структуре наполнителя реставрации можно быстро отполировать до зеркального блеска.

Блеск (30 сек.) * протестирован по ISO 2813: 2014

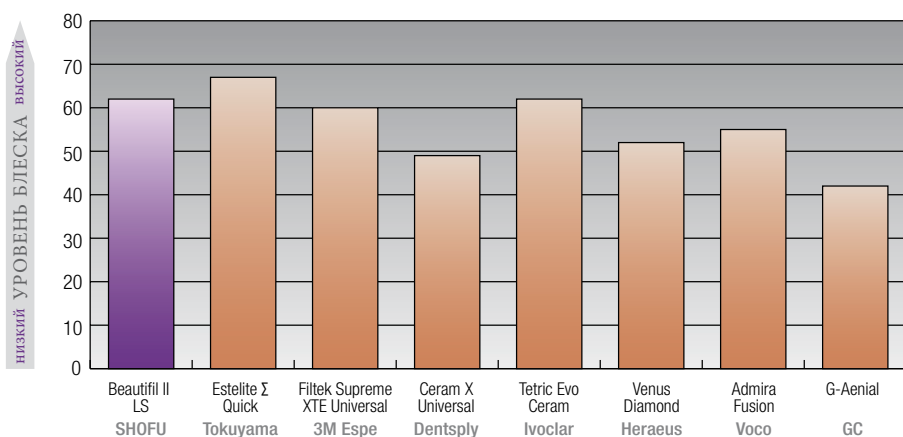

Многофункциональные стеклянные наполнители и фторполимеризованные композитные наполнители гарантируют, что Beautifulfil II LS можно быстро отполировать до зеркального блеска - для получения очень гладких поверхностей с минимальным образованием зубного налета и стойким блеском.

Реставрация с помощью Beautifulfil II LS




Ситуация после удаления пломб из амальгамы



Окончательная композитная реставрация

Диапазон оттенков

Композитная система Beautifil II LS состоит из десяти популярных оттенков зубов, двух оттенков непрозрачного дентина, одного оттенка эмали и одного оттенка отбеливателя. Это позволяет пользователям удовлетворить все эстетические требования как в многослойной, так и в однослойной технике. Цветовая гамма идентична Beautifil II и отличается превосходной стабильностью цвета.

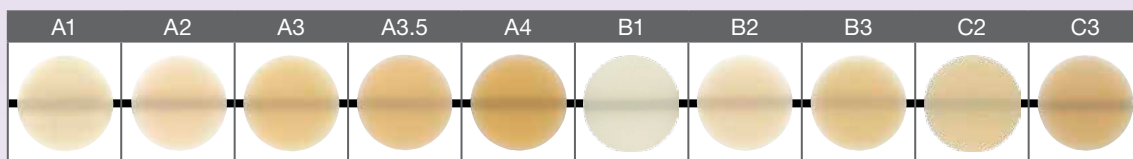


Цвета A1-C3 соответствуют классическим оттенкам VITA*.



Оптические характеристики

Beautifil II LS имитирует светопропускание и эффекты рассеивания эмали и дентина благодаря своей уникальной технологии наполнения. Эта идеальная адаптация позволяет стоматологам создавать реставрации с оптическими характеристиками естественных зубов.

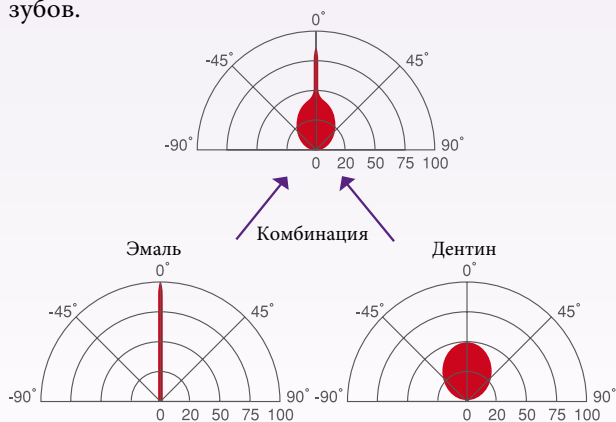

Плюсы

- Низкая усадка (<1%) и напряжение усадки
- Отличная полируемость и стойкий блеск
- Высокая стойкость к истиранию и прочная поверхность.
- Естественное пропускание и рассеивание света
- Устойчивое выделение и пополнение фтора
- Цветовая гамма идентична Beautifil II

Информация для заказа

BEAUTIFIL II LS - Шприцы и насадки



Оттенок	БЕС 4 g
ШПРИЦ	
A1	Y2270
A2	Y2271
A3	Y2272
A3.5	Y2273
A4	Y2274
B1	Y2275
B2	Y2276
B3	Y2277
C2	Y2278
C3	Y2279
A20 (opacious A2)	Y2280
A30 (opacious A3)	Y2281
Inc (Incisal)	Y2282
BW (Bleaching White)	Y2283

Shade	БЕС 0.25 g
НАКОНЕЧНИКИ, 20 шт.	
A1	Y2284
A2	Y2285
A3	Y2286
A3.5	Y2287
A4	Y2288
B1	Y2289
B2	Y2290
B3	Y2291
C2	Y2292
C3	Y2293
A20 (opacious A2)	Y2294
A30 (opacious A3)	Y2295
Inc (Incisal)	Y2296
BW (Bleaching White)	Y2297

Сопутствующие товары



BeautiBond Universal
Самопротравливающий клей



FL-Bond II
Самопротравливающаяся «двухступенчатая» адгезивная система с выделением фторида.



ООО Алкор Дент
125310, Россия,
Москва, Пятницкое шоссе, дом 36 корп. 1
Тел. 8 499 550 34 00, +7 905 701 66 62