

FL-BOND II

Самопротравливающаяся адгезивная система с высвобождением фторида



PRG
Technology
Giomer



FL-BOND II

FL-BOND -Самопротравливающаяся, «двухступенчатая» адгезивная система с высвобождением фторида с отличными адгезионными свойствами к эмали и дентину, позволяющая добиться надежной герметизации кромок.

Система отличается простотой применения и улучшенными биосовместимыми свойствами.

Шаг 1 - Праймер

Праймер FL-BOND II содержит новый эффективный адгезивный мономер и новый фото инициатор. Поскольку праймер не содержит НЕМА и ацетона. Послеоперационная чувствительность и изменение цвета десен возникают значительно реже.

Самопротравливающийся праймер кондиционирует поверхности эмали и дентина, устраняя необходимость в отдельном травлении фосфорной кислотой.

Показания

- Адгезивная фиксация композитов к твердым тканям зуба
- Предварительная обработка твердых тканей зуба перед наложением полимерных цемента
- Ремонт реставраций


Шаг 2 - Бонд

Бонд FL-BOND II содержит впитывающий фтор наполнитель S-PRG. (Стеклоиономер с предварительной реакцией на поверхность) и обеспечивает непрерывное фторирование твердых тканей зуба. Благодаря высокому содержанию наполнителя FL-BOND II очень устойчив к истиранию и с прочным уплотнением, эффективно предотвращает вымывание по краям.




Простое и быстрое приложение


Двухэтапное нанесение занимает примерно 35 секунд, устраняя необходимость в сложных или трудных этапах, таких как травление, встряхивание, смешивание и контроль влажности.

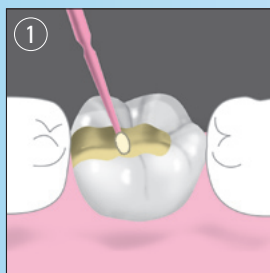


1 Нанесите праймер на поверхности эмали и дентина и дайте постоять 10 секунд.

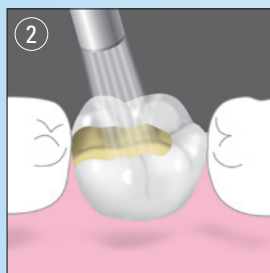

2 Осторожно продуйте безмасляным воздухом (не смывайте водой)

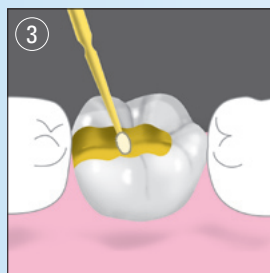

3 Равномерно нанесите связующий агент на всю полость.

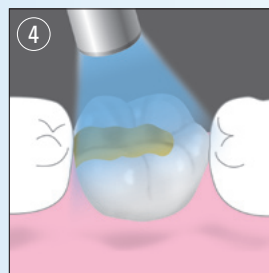


4 Светотверждение: 10 секунд с галогенной лампой или 5 секунд со светодиодной лампой

Оптимальная вязкость и адгезия


Средне-жидкая консистенция FL-BOND II облегчает нанесение, а также стабильна при наклонных стенках полости. Это гарантирует одинаковую прочность пленки на всех подготовленных поверхностях и плотное прилегание.

Низкая вязкость
(другие связующие системы)

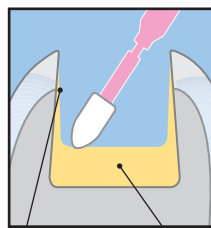

Очень тонкий связующий слой
Жидкость собирается на дне полости


Средняя вязкость
(FL-BOND II)

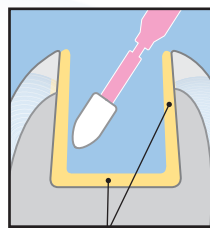

Равномерное распределение по полости.

Рентгеноконтрастность для надежной диагностики

FL-BOND II имеет высокую рентгеноконтрастность для надежной диагностики. Это гарантирует, что реставрация и связующий слой хорошо видны на рентгеновском снимке.

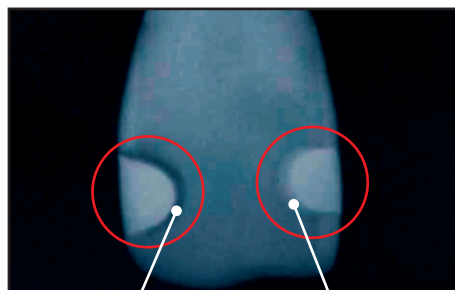

Обычная система склеивания

FL-BOND II

Постоянная защита

FL-BOND II содержит 40% фтор содержащих высвобождающих и абсорбирующих наполнителей S-PRG. Это обеспечивает постоянную дополнительную защиту от вторичного кариеса и оптимальную реминерализацию твердых тканей зуба.

Высвобождение фторида в мкг / см²




Высвобождение и поглощение фторида из FL-BOND II


Надежная адгезия

FL-BOND II склеивает за счет использования усовершенствованных адгезионных мономеров и фото инициаторов с одинаковой прочностью по отношению к эмали и дентину. Праймер, не содержащий НЕМА, предотвращает изнашивания связи в результате гидролиза и, таким образом, обеспечивает долговременную стабильность соединения.

Начальная прочность сцепления (через 24 часа)

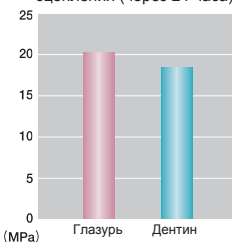

Прочность сцепления после 2000 термоциклов

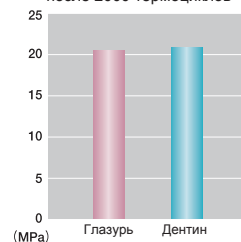

Информация для заказа



FL-BOND II Набор

- Праймер 5 мл
 - Клей 5 мл
 - MicroBrush Розовые и Желтые, по 25 шт.
 - 1 чаша для замешивания, 1 крышка.
- Номер для заказа 1306

FL-BOND II

- Праймер 5 мл Номер заказа 1307

FL-BOND II

- Клей 5 мл.
- Номер для заказа 1308

FL-BOND

- Протравка 6 мл Номер заказа 1309



Композитный наполнитель BEAUTIFIL II, специально разработанный для FL-BOND II, обеспечивает эстетичный внешний вид и отличные технологические свойства. В сочетании с FL-BOND II высвобождение фторида увеличивается.



BEAUTIFIL II 6 Color Set
Номер для заказа 1775

BEAUTIFIL II Tips 6 Color Set
Номер для заказа 1776

BEAUTIFIL II Cosmetic Kit
Номер для заказа 1777

BEAUTIFIL II Tips 3 Color Set
Номер для заказа 1778



Алкор Дент

125310, Россия, Москва,
Пятницкое шоссе, дом 36 корп. 1
Тел. +7 499 550 34 00
+7 905 701 66 62
+7 499 714 70 30
www.alkordent.ru
korchagin-dental@mail.ru