


Профессиональные абразивы, отвечающие наивысшим требованиям

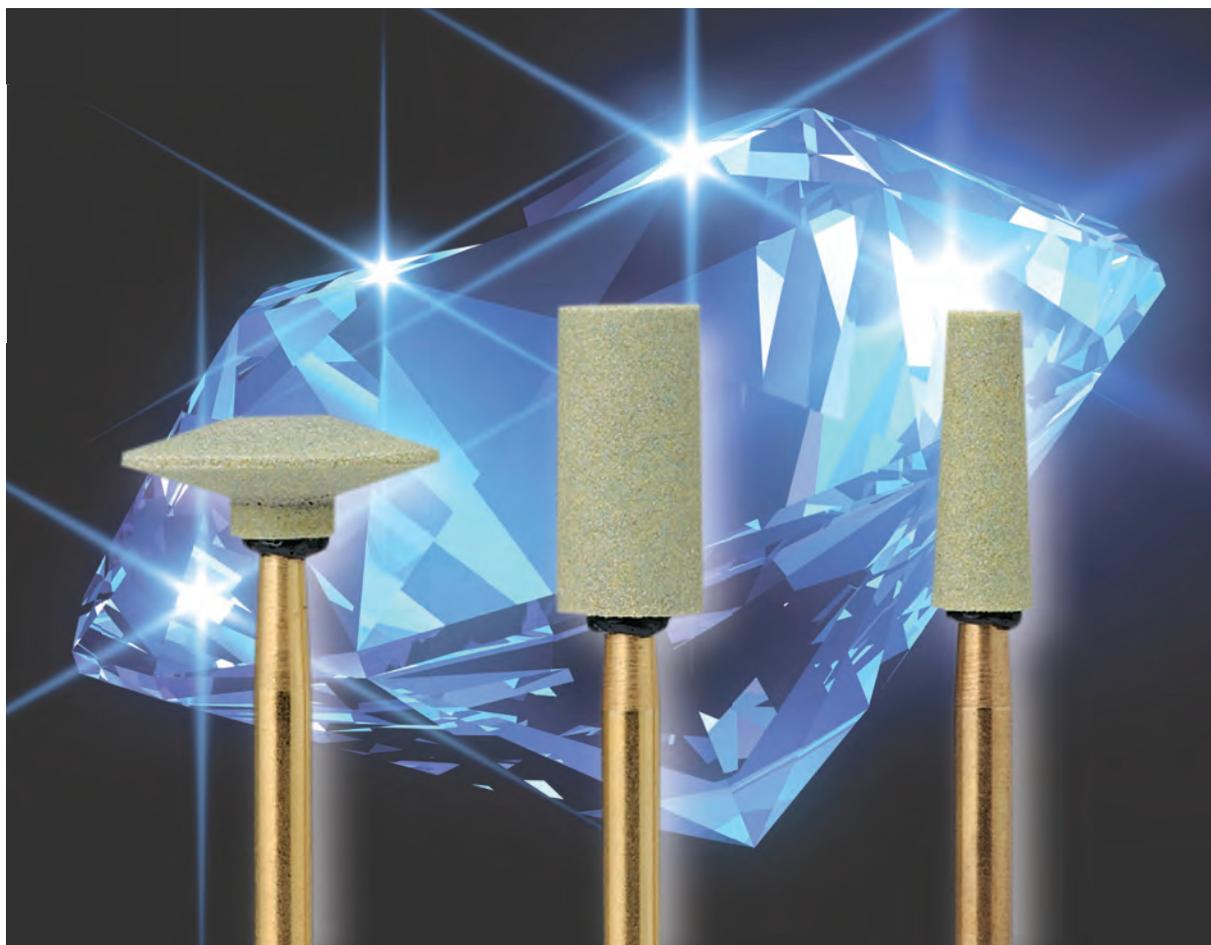

Dura-Green® DIA

Контурирование и финирирование цельнокерамических и циркониевых реставраций теперь стало намного проще, быстрее и безопаснее.

Благодаря алмазным частичкам в специальном связующем веществе **Dura-Green DIA** обладают непревзойденными абразивными свойствами и высокой эффективностью в широком спектре применения.

Абразивы **Dura-Green DIA** позволят вам откорректировать любую керамическую поверхность, обработать мелкие анатомические особенности или хрупкие, тонкие маргинальные области коронки при низком давлении – сводя к минимуму риск образования сколов или микротрещин.




Dura-Green® DIA

Преимущества с первого взгляда

- Эффективная и аккуратная обработка материала благодаря тому, что Dura-Green DIA насыщены алмазами по всей поверхности
- Риск образования микротрещин сведен к минимуму
- Низкое контактное давление
- Низкая вибрация
- Минимальный нагрев
- Высокая стабильность формы края


Насыщенная алмазами микроструктура абразивов Dura-Green DIA обладает более однородной обрабатывающей поверхностью и более длительным сроком эксплуатации, по сравнению с силиконо-карбидными инструментами.

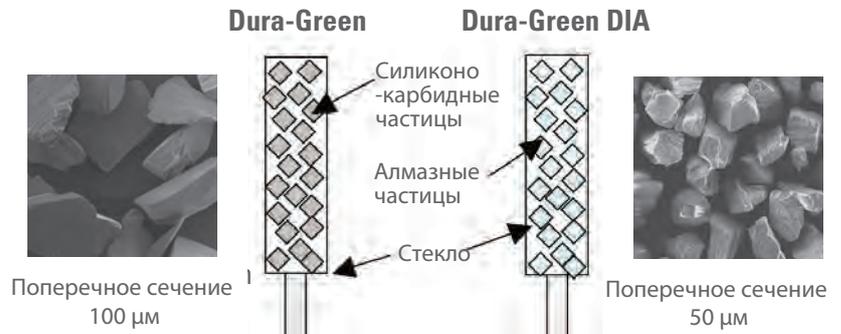

Идеально для обработки: цельно-циркониевых реставраций и циркониевых каркасов, дисиликата лития, оксида алюминия, прессованных и цельнокерамических конструкций, а также металлических поверхностей

Форма

Максимальная скорость
30,000 rpm

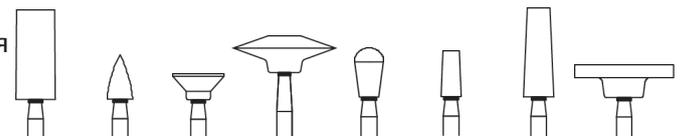


Форма	CY5	FL3	IC5	KN7	RD3	TC2	TC4	WH6
ISO No.	056	031	070	125	035	025	040	125
HP	0156	0158	0162	0154	0159	0161	0155	0157
CA		0163			0164	0165		

Упаковка по 2 шт.: CY5, KN7, WH6/ Упаковка по 3 шт.: FL3, IC5, RD3, TC2, TC4

PN	Формы	Содержание
0153	Kit HP: CY5, KN7, TC4	По 1 шт.
0166	Kit CA: FL3, RD3, TC2	По 1 шт.
0504	Корректировщик	1 шт.

Эффективная, многогранная, аккуратная обработка поверхности

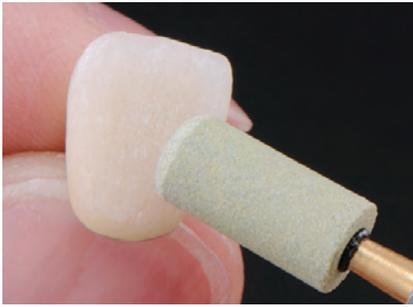

CY5: Корректировка поверхности.
Отличные режущие свойства обеспечивают удобную корректировку поверхности и достаточную редукцию материала.



KN7: Обработка каркаса.
Мягкая обработка межзубных и маргинальных областей и корректировка толщины стенок



TC4: Детальное финирирование.
Эта форма помогает эффективно проработать детали поверхности и создать окклюзионную подгонку каркаса



Для чистки и изменения формы обработайте абразив Dura-Green DIA корректировщиком Shofu (оксид алюминия), используя стирательные движения



ЧП «Вертикаль»
Кирова, 46, оф. 210
Тел. 056 232 06 10
056 236 69 02
www.vertical.dp.ua