

# Super-Snap

## X-TREME

FINIEREN & POLIEREN

&

# Super-Snap



# Высококачественные шлифовальные и полировальные диски

## Super-Snap X-Treme

Современная трехмерная технология всего за два шага


Новые полировальные диски Super-Snap X-Treme - дальнейшее развитие известных зеленых и красных дисков Super-Snap - характеризуются более длительным сроком службы и повышенной прочностью, но при этом сохраняется их известная гибкость в межзубной области.



Полируйте с помощью Super-Snap X-Treme Standard-Disk



Полировка до зеркального блеска с минидисками Super-Snap X-Treme

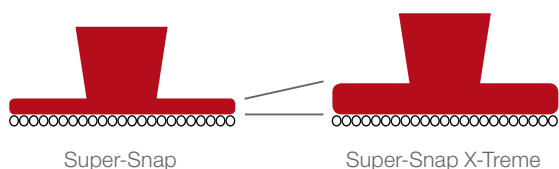

Диски Super-Snap X-Treme (мини и стандартного диаметра) с двусторонним покрытием толще, чем диски Super-Snap, что обеспечивает более высокое контактное давление во время полировки. Дополнительная толщина обеспечивает лучшую тактильность и приводит к оптимальному глянцевому блеску.

- Дальнейшее развитие оригинальных зеленых и красных дисков Super-Snap
- Более утолщенные для большей жесткости, тактильности и упругости с сохранением высокой гибкости в аппроксимальной области
- Новое трехмерное покрытие предотвращает засорение поверхности
- Очень высокий уровень блеска достигается при очень низкой шероховатости поверхности.
- Покрытие с двух сторон оксидом алюминия
- 2 размера: стандартный (12 мм) и мини (8 мм)

Зернистость поверхности Super-Snap X-Treme, увеличено в 400x




Зеленый диск - тонкая полировка



Красный диск - сверхтонкий глянцевый



Отсутствие засорения поверхности и вторичных царапин благодаря новому трехмерному покрытию: полировальный абразивный материал может быть нанесен между однородно распределенными полусферами частиц оксида алюминия и перенесен наружу.

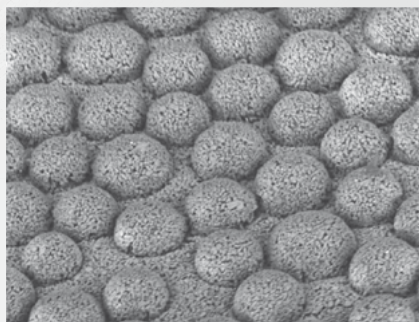

Полусферическое 3D-покрытие  
400 x 200 мкм




Поверхность зуба после полировки  
красным диском (особо мелкое зерно)

Отполируйте до блеска - не забывая  
поверхность

Красные диски Super-Snap X-Treme являются особенными: впервые они имеют поверхность с трехмерным покрытием из частиц оксида алюминия, которые предотвращают засорение или комкование.

Поверхность диска и вторичные царапины от полировальной пыли надежно предотвращаются.

Степень блеска (Gs)

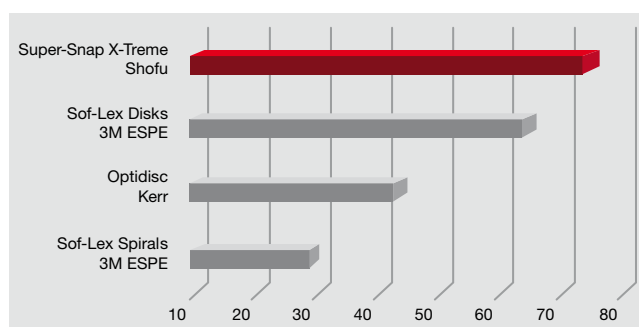

## Super-Snap

Награжден премией THE DENTAL ADVISOR «Лучшая композитная финишная и полировочная система» шесть лет подряд

С помощью Super-Snap, 4-ступенчатой дисковой системы, вы можете легко, быстро и безопасно формировать контур, отделять и полировать все микронаполненные и наногибридные композиты.

Диски покрыты карбидом кремния или оксидом алюминия и не имеют металлического центра, чтобы избежать повреждений.

- Цветовая маркировка в зависимости от размера зерна: грубый (черный), средний (фиолетовый), тонкий (зеленый) и очень тонкий (красный)
- Очень тонкий и очень гибкий, идеально подходит для аппроксимальной области
- Без металлического центра, без повреждений
- Эластичные ремни из силикона для удобного крепления на оправке

Зернистость поверхности Super-Snap, 400-кратное увеличение




Черный диск - грубая обработка



Пурпурный диск - средняя обработка



Зеленый диск - финишная полировка

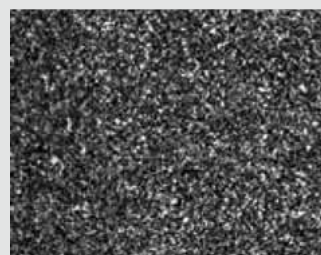

Красный диск - Экстра финишная полировка

# Информация для заказа

## Super-Snap X-Treme

	Полировка		Блеск	
<b>Super-Snap X-Treme</b>				
50 шт. / Упак.	L511	L531	L512	L532
Цвет / зерно	Зеленый / полир		Красный / экстраполир.	



Стандартный комплект дисков Super-Snap X-Treme

по 50 стандартных дисков зеленого и красного цветов

Best.-Nr. 0506



Super-Snap X-Treme Minidisk Kit

по 50 мини-дисков зеленого и красного цветов

Best.-Nr. 0507

## Super-Snap

	Konturieren		Finieren				Polieren		Hochglanz	
<b>Super-Snap</b>										
50 шт. / Уп.	L506	L507	L508	L509	L528	L522	L501	L519	L502	L521
Цвет / зерно	Черный / грубый		Фиолетовый / средний				Зеленый / мягкий		Красный / свермягкий	

### Super-Snap Rainbow Technique Kit

100 стандартных дисков, 80 дисков мини 40 полировальных лент  
2 камня Dura-White (CN1 и FL2)  
1 миди-наконечник CompoSite Fine  
4 угловых оправки (сталь)  
№ заказа. 0500

### Super-Snap Mini-Kit

32 стандартных диска, 16 мини-дисков,  
1 миди-наконечник CompoSite Fine,  
1 угловой стержень (сталь)  
№ заказа. 0505

### Super-Snap Polierstreifen

100 полировальных полосок черного (грубого) и фиолетового (среднего) цвета, арт. L525  
100 полировальных полосок зеленого (тонкого) и красного (сверхтонкого) цветов. L526


### Mandrels 6 шт

№ заказа. 0439

### Пластиковые мандрели

100 шт

Best.-Nr. 0440

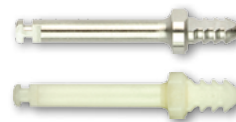

**Алкор Дент**

125310, Россия, Москва,  
Пятницкое шоссе, дом 36 корп. 1  
Тел. +7 499 550 34 00  
+7 905701 66 62  
www.alkordent.ru  
korchagin-dental@mail.ru