

Многослойный оксид циркония премиум-класса!



SHOFU Disk ZR Lucent Supra

Многослойный оксид циркония для любых задач

SHOFU Disk ZR Lucent Supra сочетает в себе варианты высокопрочного оксида циркония в чрезвычайно высокоэффективном многослойном материале. Повышенная степень прозрачности от шейки зуба до зубной эмали и выдающаяся прочность на изгиб во всех зонах делают его идеальным решением для любой клинической картины. Монолитный, частично или полностью облицованный: SHOFU Disk ZR Lucent Supra всегда убедителен.

Покрывается широкий спектр показаний, в том числе мостовидный протез на 14 единиц с двумя соединенными промежуточными звеньями в переднем и заднем отделах. Благодаря более высокому отражению света в области шейки по сравнению с ZR Lucent, ZR Lucent Supra также обеспечивает живой внешний вид без компромиссов, особенно в случаях с более высокими требованиями к маскировке, такими как Б. на обесцвеченных культи и имплантатах.



Эмаль

Предел прочности при изгибе 1.034 МПа
44 % Полупрозрачности

Дентин

Предел прочности при изгибе 1.163 МПа
40 % Полупрозрачности

Цервикал

Предел прочности при изгибе 1.454 МПа
37 % Полупрозрачности

Испытание на трехточечный изгиб (DIN-ISO 6872), прозрачность (JIS R 3106: 1998, цвет A2)

Идеально до мельчайших деталей: покраска или эстетическая оптимизация




В зависимости от требований монолитные реставрации из SHOFU Disk ZR Lucent Supra могут быть эстетически оптимизированы и герметизированы красителями и глазури Vintage Art Universal. Если вы хотите эстетически усовершенствовать уменьшенный каркас, вы можете добавить анатомическую форму с помощью Vintage ZR Dentin и эмалевых материалов.



Фотографии: Джун Ивата, доктор стоматологии, доктор философии / реставрация: Шинья Курamoto, стоматологический кабинет CDT Ивата, Япония


Преимущества и показания

- Мультипоказательные мостовидные протезы до 14 единиц с двумя перемычками
- Совместимость со всеми распространенными системами CAD / CAM
- С Vintage ZR можно использовать техники покраски, обрезки и облицовки.
- Градиент цвета и полупрозрачности
- Эстетика высшего класса, сравнимая с дисиликатом лития
- Безупречный внешний вид, особенно на имплантатах

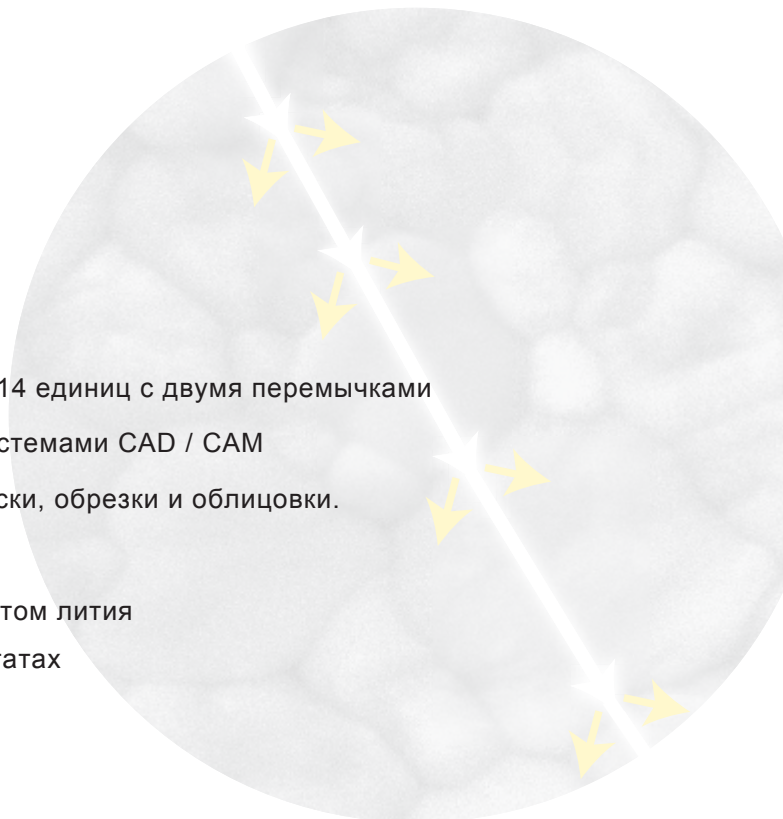


Ярче, более блестящей, живее

Сбалансированное соотношение необходимой прозрачности и высокой прочности является результатом различного размера зерен отдельных слоев. Чем крупнее частицы, тем больше света они пропускают и тем меньше света проникают или отражают. Чем мельче частицы, тем больше они отражают и рассеивают свет. Результатом является интенсивное отражение света в высокопрочной пришеечной области, которое уменьшается после режущего края. В результате реставрации выглядят значительно ярче, более блестящей и живее, чем обычные полупрозрачные многослойные цирконы.

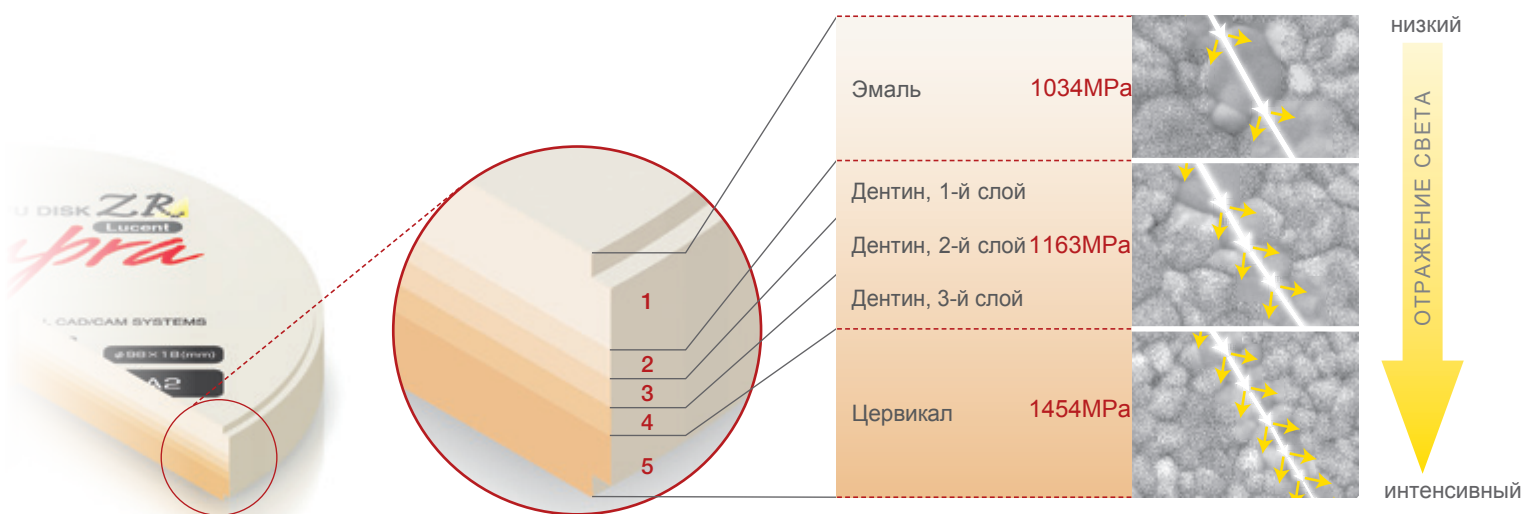

Больше прочности - даже при больших конструкциях

Помимо оптических преимуществ, высокая прочность на изгиб SHOFU Disk ZR Lucent Supra, превышающая 1000 МПа по всей высоте бланка, обеспечивает большую безопасность при очень больших конструкциях. Это дает вам свободу выбора положения размещения на диске.

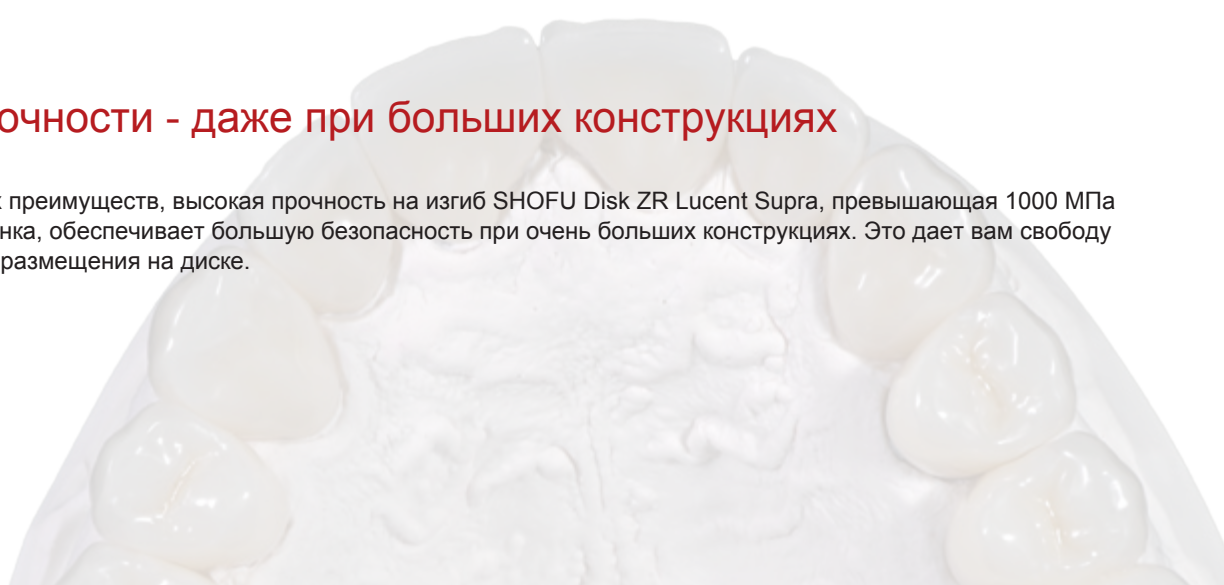

Спецификации

| | |
|---|--|
| Диаметр | 98,5 mm (inkl. Schulter) |
| Высота | 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 22 мм |
| Цвета | Чисто белый, W0, W2, A1, A2, A3, A3,5, B1, B3, C1, C3, D2 |
| Прочность на изгиб спеченного материала (DIN-ISO 6872:2015) | Эмаль: (30%) 1.034 МПа Дентин: (35%) 1.163 МПа Цервикал: (35%) 1.454 МПа |
| Твердость по Виккерсу неспеченная (HV 0,2) (DIN-ISO 6507: 2005) | Эмаль: HV 45 Цервикал: HV 65 |
| Температура спекания | 1.450 °C |
| Полупрозрачность (Цвет A2 / толщина 0,5 мм) | Эмаль: 44% Дентин: 40% Цервикал: 37% |

Информация для заказа

| Диск | 12 мм | 14 мм | 16 мм | 18 мм | 22 мм |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Чисто белый | Z0156 | Z0168 | Z0180 | Z0192 | Z0204 |
| W0 | Z0157 | Z0169 | Z0181 | Z0193 | Z0205 |
| W2 | Z0158 | Z0170 | Z0182 | Z0194 | Z0206 |
| A1 | Z0159 | Z0171 | Z0183 | Z0195 | Z0207 |
| A2 | Z0160 | Z0172 | Z0184 | Z0196 | Z0208 |
| A3 | Z0161 | Z0173 | Z0185 | Z0197 | Z0209 |
| A3,5 | Z0162 | Z0174 | Z0186 | Z0198 | Z0210 |
| B1 | Z0163 | Z0175 | Z0187 | Z0199 | Z0211 |
| B3 | Z0164 | Z0176 | Z0188 | Z0200 | Z0212 |
| C1 | Z0165 | Z0177 | Z0189 | Z0201 | Z0213 |
| C3 | Z0166 | Z0178 | Z0190 | Z0202 | Z0214 |
| D2 | Z0167 | Z0179 | Z0191 | Z0203 | Z0215 |



Заготовки для фрезерования SHOFU ZR Lucent и ZR Lucent Supra являются результатом сложного и сертифицированного производственного процесса из порошка оксида циркония высокой чистоты от качественного производителя TOSOH, Япония.



ООО "Алкор Дент"
125310, Россия, Москва,
Пятницкое шоссе, дом 36 корп. 1
Тел. +7 499 550 34 00,
+7 905 701 66 62
+7 499 714 70 30
korchagin-dental@mail.ru
www.alkordent.ru



Алкор Дент